

## Gebruiksaanwijzing 3D massagestoel HM-5200

### Afstandsbediening



**Aan/uit:** Druk op de aan/uit toets om de massagestoel te starten, de massagestoel zal zich nu in stand-by modus plaatsen. Met behulp van het menu kan je een automatisch of handmatig massageprogramma selecteren, het massageapparaat zal dan eerst de schouderhoogte detecteren en vervolgens starten met de massage. Om de stoel uit te schakelen druk je nogmaals op de aan/uit toets, de massagestoel zal nu worden uitgeschakeld en terugkeren naar de oorspronkelijke positie. Het bedieningspaneel wordt in 3-5 seconden uitgeschakeld.




**Automatische modus:** Als u deze toets indrukt, zal u overschakelen naar de automatische modus. 1 van de 5 automatische massagefuncties zal starten, links bovenaan ziet u dewelke. Als de gebruiker nogmaals op deze toets duwt zal 1 van de 5 andere massagefuncties starten. Zo kunt u blijven duwen tot de gewenste automatische massagefunctie links bovenaan het startscherm verschijnt. Er zijn vijf autoprogramma's naar keuze: 'recovery 1', 'recovery 2', 'stretching', 'pulse massage', en '3Dexperience'. Ook is er de 'special' waarbij er nog 5 extra massagefuncties zijn, namelijk: 'strong course', 'healing', 'sleeping', 'neck and shoulders' en 'back and waist'.




**Menu:** Met deze menuknop is het mogelijk alle massages in te stellen en te bekijken. Ook enkele instellingen kunnen hier worden aangepast, namelijk de tijd van de gewenste massage, de taal en er is een stopfunctie om de gekozen massage stil te leggen. De gebruiker kan hier kiezen tussen alle verschillende massagefuncties. Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de startpagina.



**Pauzeren:** Druk op deze toets om de massagefunctie te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om de massagefunctie opnieuw te starten.

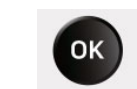

**OK:** Druk op de OK-knop om de menukeuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.

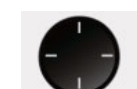

**Navigatie:** De richtingsknop heeft vier knoppen; omhoog, omlaag, links en rechts. Bij de menuknop kan de gebruiker op boven of beneden drukken om een massage te kiezen. De gebruiker drukt op links of rechts om het vorige of volgende menu te openen. De omhoog en omlaag knop kunnen ook worden gebruikt om de massagepositie in acupunctuurpuntracking aan te passen. Bij de muziekbediening regelen de linker- en rechterknop de vorige en volgende nummerkeuze. Met de knoppen omhoog en omlaag kunt u het volume regelen. Het volume groeit met één staafje elke twee keer dat u op de knop drukt.



**Massagebreedte:** Aan de hand van deze knop kan de massagebreedte worden aangepast. De breedte kan enkel en alleen worden aangepast tijdens het kiezen van enkele specifieke manuele massages. Eerst en vooral zal je aan de hand van de navigatie 'manual' moeten kiezen, vervolgens druk je op 'mode', kies dan tussen 'tap', 'knock' of 'shiatsu'. Bij deze 3 massagestanden kan de breedte worden aangepast. Bij 'knead' of 'knead&tap' werkt de knop niet.



**Intensiteit luchtmassage:** Na het kiezen van een massage drukt u op deze knop om de intensiteit van de luchtmassage in te stellen. U kan kiezen tussen niveau één, twee of drie. Wanneer u 3 keer op deze knop duwt zal u alle 3 de staafjes zien kleuren op het scherm. Wanneer u nog een vierde keer duwt zal alleen het eerste staafje kleuren, dit betekent dat de intensiteit van de massage op het laagste niveau staat.



**Intensiteit massagebal:** Met deze knop kunt u de intensiteit van de massagebal aanpassen. Op het startscherm zal u de staafjes van de '3D' functie zien kleuren naarmate het aantal keer u op deze toets drukt.



**Beenmassage:** De beenmassage kan aan de hand van deze knop worden in- of uitgeschakeld. Wanneer u de beenmassage uitschakelt zal deze niet meer kneden.



**Benensteun omhoog:** Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de benensteun omhoog gaan.

Laat je de knop los, dan zal de benensteun stoppen met bewegen. De regelaar geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet wel bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.



**Benensteun omlaag:** Wanneer u op deze toets blijft drukken, zal de benensteun naar beneden gaan. Laat je de knop los dan zal de benensteun stoppen met bewegen. De regelaar geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet wel bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.



**Gewichtloosheidspositie:** De 3D massagezetel heeft 2 fases in de gewichtloosheidspositie. Druk op deze toets om de massagestoel in de gewichtloosheidspositie level 1 te plaatsen. Druk nogmaals op deze toets om gewichtloosheidspositie level 2 te bereiken en druk een laatste keer om terug te keren naar de standaard positie.



**Hellingshoek rugleuning <:** Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de hellingshoek van de rugleuning vergroten. Laat je de knop los, dan zullen zowel de rugleuning als de benensteun stoppen met bewegen. De controller geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet wel bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.



**Hellingshoek rugleuning >:** Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de hellingshoek van de rugleuning verkleinen. Laat je de knop los, dan zal zowel de rugleuning als de benensteun stoppen met bewegen. De controller geeft 'chair posture adjusting...' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet wel bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken.

## Extra informatie

Druk op de aan/uit-knop als de stroom is ingeschakeld, een zoemer piept eenmaal kort. Nu verschijnt het LCD-scherm, na 2-3 seconden wordt het startscherm getoond en gaat het over naar de standby-modus.

Wanneer u op de menu-knop drukt kunnen alle mogelijke massage-functies en ook de instellingen worden beheert. Druk nogmaals op menu als je wil terugkeren naar het startscherm.

**Automatische massage:** druk op de menuknop, de cursor staat standaard op de functie 'automatische massage'. Druk vervolgens op de ok-knop om naar de automatische modus te gaan. Je hebt keuze uit 5 automatische programma's: 'Recovery 1', 'Recovery 2', 'Stretching', 'Pulse Massage', '3DExperience' en 'Special'. De 'special' functie bestaat uit nog vijf extra automatische massageprogramma's.

Nadat de stroom is ingeschakeld, zal de eerste keer dat u het automatische programma gebruikt de massagestoel de acupunctuurpuntpositie detecteren. Dan zal "acupunctuur point tracking..." op het scherm worden weergegeven. Nadat de acupunctuurpuntracking is voltooid, zal de zoemer 5 keer (één keer per seconde) tikken, ondertussen is de massagestoel de schouderpositie aan het detecteren. Als de gebruiker vindt dat de positie niet juist is, drukt u omhoog of omlaag op de navigatietoets om dit aan te passen. Tijdens het aanpassen zal "acupunctuur point adjusting..." te zien zijn op het scherm. Let wel: dit kan alleen worden aangepast bij de automatische massages.

**Manuele massage:** druk op de menuknop, selecteer 'manual' aan de hand van de navigatietoets, druk op de ok-knop. Er zijn vijf opties, namelijk: 'mode', 'position', 'width', 'speed' en '3D'. Selecteer de gewenste functie en druk vervolgens op de ok-knop om het volgende menu te openen. Selecteer de gewenste massage of ga terug naar het overzicht aan de hand van de linker pijl van de navigatietoets. Wanneer de gebruiker een manuele massage gestart heeft drukt deze op de menu-knop om terug naar het startscherm te gaan. Gebruikers kunnen nu de omhoog/omlaag-knop gebruiken om de massagepositie aan te passen, informatie als "massage position adjusting..." zal dan worden weergegeven op het display scherm.

Opmerking:

1. Overall: Bij het kiezen van een gehele massage, zal er slechts één keer een schouderhoogtedetectie worden uitgevoerd
2. Partial of fixed point: De 'partial' en 'fixed point' massage hebben geen schouderhoogtedetectie nodig, wanneer je een andere massage kiest zal er wel een schouderhoogtedetectie worden uitgevoerd

**Lucht:** druk op de menu-knop, kies 'air' via de navigatie en druk vervolgens op de ok-knop. Nu zijn er twee soorten luchtdrukfuncties waaruit je kan kiezen: 'position' en 'intensity'. Kies de gewenste functie, druk op de ok-knop om het volgende menu te zien en kies opnieuw de gewenste functie.

**Roller:** druk op de menu-knop op de afstandsbediening, kies 'roller'. U zult zien dat er drie opties zijn waaruit u kan kiezen 'level 2', 'level1' en 'stop'.

**Warmte:** druk op de menu-knop, kies 'heating' aan de hand van de navigatie en druk vervolgens op start. Wanneer de warmte geactiveerd wordt zal er een warmtesignaal op het startscherm verschijnen.

**Instelling:** druk op de menuknop, kies 'settings' en kies vervolgens de tijd (timer), taal (language) of stopknop (stop button) om de massage te stoppen.

Timer: kies de gewenste duur van de massage: 10min, 20min, 30min of 50min, wanneer de tijd om is wordt de stroom automatisch uitgeschakeld

Taal: vereenvoudigd Chinees, Engels en Koreaans zijn beschikbaar

Stop: deze knop zal gebruikt worden om alle massagefuncties uit te schakelen